

Kontrola přístroje

Před prvním použitím biolampy UNIZDRAV si prosím pečlivě přečtete návod k použití a seznamte se s vlastnostmi přístroje a jeho způsoby použití a návod k použití uschovejte na bezpečném místě, abyste jej měli kdykoliv v budoucnosti k dispozici. Zároveň také vždy pečlivě dodržujte níže uvedené zásady.

Po rozbalení biolampy UNIZDRAV se přesvědčte o tom, že se biolampa při přepravě nepoškodila a zda jsou v balení všechny níže uvedené části.

Obsah balení:

- 1 ks UNIZDRAV léčebná biolampa se základním žlutým filtrem a se síťovým adaptérem
- 1 ks UNIZDRAV návod k použití, který obsahuje prohlášení o shodě a záruční list

Před prvním použitím biolampy se přesvědčte, zda jsou obě části přístroje (samotná biolampa a síťový adaptér) nepoškozeny a také, zda není kabel spojující obě části ulomen, natržen nebo jinak poškozen. V případě, že zjistíte jakékoli poškození, síťový adaptér nezapojujte do zásuvky a biolampu nezapínejte! Přístroj reklamujte u prodejce nebo jej spolu se záručním listem pošlete do servisního střediska.

se léčebná biolampa skládá také z křehkých součástí (sklo, halogenová zářivka, optické filtry), musíte s ní zacházet velmi opatrně. Větrací otvory (dírký v zadní části zařízení) musí být v zájmu účinného chlazení vždy odkryty a přístupné.

Použití léčebné biolampy bezpodmínečně konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, kožním lékařem nebo odborně vzdělanou kosmetičkou! Biolampu používejte pouze a výlučně podle rady odborníka.

Léčebnou biolampu UNIZDRAV může obsluhovat pouze dospělá osoba. Dítě nebo neplnoletá osoba nesmí biolampu obsluhovat!

Všeobecný popis

Světlo léčebné biolampy UNIZDRAV je lineárně polarizované, což znamená, že se světelné vlny vycházející z biolampy pohybují v rovnoběžné rovině. Stupeň polarizace světla je více než 99 %. Polarizované světlo je polychromatické, tj. obsahuje široké spektrum vlnových délek (obsahuje více barev) na rozdíl například, od laserového světla, které je monochromatické. Polarizované světlo je zároveň tak inkoherentní (fázově posunuté), což znamená, že světelné vlny nejsou synchronizovány.

Polarizované světlo neobsahuje pokožce škodlivé ultrafialové světlo!

Biostimulační efekt: Biologická klinická vyšetření dokazují, že polarizované světlo má stimulační účinek při působení na pokožku, jelikož stimuluje mikrocelulární mechanismus citlivý na světlo a biomolekuly. To vyvolává řetězovou reakci ve vnitřní buňce a také sekundární reakci, která nepůsobí jen na ošetřené místo, ale na celý organismus. Půznivě působí na zlepšení biologických procesů souvisejících s činnostmi zdravých buněk a stejně tak i na léčení buněk nemocných.

Biostimulační efekt je obzvláště dobře použitelný v případech změny povrchu kůže (např. rány, vředy) a při jejich léčbě značně napomáhá právě ozařování polarizovaným světlem.

Oživovací efekt: Léčba polarizovaným světlem povzbuzuje a mění v těle probíhající procesy obnovení a regenerace, stejně jako procesy v imunitním systému organismu.

Přirozeně posilující efekt: Světelná terapie polarizovaným světlem přirozeným způsobem posiluje regenerační schopnosti organismu a tím napomáhá obnovení jeho přirozených samoléčebných schopností.

Kolorterapie (barevná terapie) je léčba barvy a má více než tisíce letou historii. I přesto, že se kolorterapie polarizovaného světla používá jen několik let, její základy tvoří indická metoda barev čakry.

Čakra je energetický vír, který patří k soustavě jemné energie. Tato soustava je základem fyzické, citové, mentální a duševní samoléčebné metody, kterou začaly praktikovat v časech pravěké Indie. Podle hinduistického podání rozeznáváme sedm čakr, které jsou umístěny nad sebou. Každá čakra má svoji charakteristickou frekvenci, která určuje její barvu a jiné vlastnosti.

Na základě jiné teorie má každá živá bytost svoji vlastní auru, což je bioelektromagnetické pole (energie), které obklopuje každou

Biolampa UNIZDRAV + barevná terapie + stojan k biolampe (zvýhodněný set)

Návod na použití



živou bytost. Tato energie proudí do těla právě přes čakry, přičemž se přemění na novou částečnou kvalitu právě v jednotlivých čakrách. Auru lze zviditelnit fototechnickými postupy - v případě nemoci těla se mění barvy aury. Pro světelnou terapii polarizovaným světlem je důležité znát barvy aury, resp. čaker, tj. které části těla odpovídá která barva.

Barevná charakteristika těla, postupující od shora dolů:

- vrchní část hlavy - fialová barva
- po hrudní koš - modrá barva
- hrudník (plíce, srdce, brzlík) - zelená barva
- pod rebry - žlutá barva
- oblast podbřišku - oranžová barva
- pohlavní orgány - růžová barva
- od stehna dolů - červená barva

Každá barva má určitou vlnovou délku a přináší určitou dávku energie. Každá buňka má své zabarvení a své vibrace. Když buňka onemocní, její vibrace se změní. Když buňku osvítime paprskem potřebné barvy, přinutíme buňku k návratu do normální vibrace a tím ji uzdravíme.

Volitelná výbava k biolampě - barevná soustava filtrů - obsahuje 6 barevných filtrů: červený, oranžový, zelený, modrý, růžový a fialový. Sedmý filtr žluté barvy, používaný k léčbě polarizovaným světlem, se dodává přímo s přístrojem jako standardní výbava.

Přístroj vyvinutý a vyráběný společností Polar Therapy zajišťuje působení výše uvedeného účinku na vysoké úrovni. Léčebná biolampa vyzařuje lineární polarizované světlo s léčebným účinkem o vlnové délce 480 - 750 nm (hlavní z oblasti viditelného světla a blízko infračerveného světla) a světlo vyzařované léčebnou biolampou UNIZDRAV působí na ošetřované místo stálou intenzitou.

Zařízení nevyzařuje nežádoucí a pro kůži škodlivé ultrafialové (UV) světlo!

Naším cílem je nabídnout spotřebiteli i ergonomicky a esteticky co nejdokonalejší léčebný přístroj.

Popis přístroje

Léčebná biolampa UNIZDRAV se skládá ze dvou hlavních částí:

1. zdroj elektrické energie
2. biolampa zabezpečující polarizované světlo

Zdroj elektrické energie

Zásobování elektrickou energií léčebné biolampy UNIZDRAV zajišťuje síťový adaptér s dvojitou izolací s typovým označením AD-1201700AK, s parametry 230/12V, 50Hz, 1700mA. Síťový adaptér je s léčebnou biolampou spojen kabelem nízkého napětí délky 2m. Oba dva konce kabelu jsou pevně připojeny k síťovému adaptéru, resp. k léčebné biolampě. Síťový zdroj je zobrazen na obr. 1.

Biolampa UNIZDRAV vyzařující polarizované světlo

Optické, resp. elektronické prvky zabezpečující tvorbu polarizovaného světla jsou umístěny v krytu z umělé hmoty s ergonomickou rukojetí. Teplu odolná patice, ve které je umístěna halogenová žárovka spolu s filtrem, se nachází v těle přístroje a je izolována od obalu z umělé hmoty. Všechny součásti byly vyvinuty tak, aby prostup tepla na obal přístroje byl minimální a tak co nejvíce chránil uživatele.

Části léčebné biolampy UNIZDRAV jsou zobrazeny

Biolampa UNIZDRAV + barevná terapie + stojan k biolampe (zvýhodněný set)

Návod na použití



V případě, že z jakéhokoli důvodu přesáhne teplota uvnitř léčebné biolampy UNIZDRAV výrobou nastavenou teplotu, tepelná pojistka vypne a rozpojí elektrický obvod. Po poklesu teploty pojistka znovu uzavře elektrický obvod a plně obnoví funkčnost zařízení.

Ochrana léčebné biolampy UNIZDRAV před přehřátím je zajištěna dvěma součástkami. První, miniaturní ventilátor, odvádí přebytečné teplo z biolampy přes větrací otvory umístěné na zadním obalu zařízení. Druhá, tepelná pojistka umístěná ve vnitřní části zařízení, zabráňuje ohřátí vnitřní části přístroje nad nastavenou teplotu.

Hlavní prvky zadní části léčebné biolampy UNIZDRAV



Uvedené bezpečnostní prvky ochrání zařízení před nežádoucím poškozením a zajišťují maximální komfort pro uživatele.

Uvedení do provozu a použití biolampy

Biolampa UNIZDRAV + barevná terapie + stojan k biolampe (zvýhodněný set)

Návod na použití



Zapojte síťový adaptér do síťové zásuvky s napětím 230V, čímž je zařízení připraveno pro zapnutí. Biolampa UNIZDRAV je vybavena třípolohovým přepínačem (viz str. 9, obr. 2). Přepnutím přepínače do polohy I nebo II se rozsvítí žárovka, biolampa začne vyzařovat polarizované světlo a Vy můžete začít s ozařováním. Podle polohy přepínače pracuje biolampa ve dvou módech, jejichž podrobný popis naleznete v následující kapitole „Signalizace času a automatické vypnutí“.

Signalizace času a automatické vypnutí

V poloze I síťového přepínače pracuje biolampa UNIZDRAV bez zvukové signalizace nepřetržitě 20 minut. Po uplynutí času terapie 20 minut přístroj automaticky vypne žárovku. I přes vypnutí žárovky bude ventilátor sloužící k ochlazení vnitřní části přístroje pracovat bez přestání, dokud nepřepnete přepínač na přístroj do polohy „0“, a tím přístroj úplně vypnete.


Ve II. poloze přepínače signalizuje biolampa UNIZDRAV dobu činnosti zvukovými signály. Při rozsvícení biolampy a po každé uplynulé minutě se ozve krátké pípnutí. Na konci 5. minuty se ozve jedno dlouhé pípnutí, na konci 10. minuty se ozvou dvě, na konci 15. minuty tři a na konci 20. minuty čtyři dlouhá pípnutí. Po 20ti minutách, resp. po čtyřech dlouhých pípnutích, se halogenová žárovka automaticky vypne. I v této poloze přepínače ventilátor sloužící k ochlazení vnitřní části přístroje bude pracovat bez přestání, dokud nepřepnete přepínač na přístroj do polohy „0“ a tím přístroj úplně vypnete.

Nasazení a odstranění vyměnitelného polarizačního filtru

Základní balení biolampy UNIZDRAV obsahuje 1ks polarizačního filtru žluté barvy a volitelná výbava přístroje obsahuje dalších 6 ks barevných polarizačních filtrů. Nasazení a odstranění těchto polarizačních filtrů umožňuje uživateli použít biolampu i na kolorterapii = barevnou terapii.

Vždy používejte biolampu s nasazeným polarizačním filtrem!

Filtr odstraňte z přístroje pouze tehdy, pokud disponujete sadou filtrů pro barevnou terapii a chcete filtr vyměnit. Odstranění, resp. nasazení filtru je velmi jednoduché. Na obruš filtru, po celém jeho obvodu, jsou štěrby klínového tvaru, jejichž jemné změny tvaru zajišťují, že filtr nespadne. Chyťte okraj obruby filtru tak, aby štěrby zůstaly volné, a rozhodným pohybem zatáhněte obrubu filtru ve směru šipky A

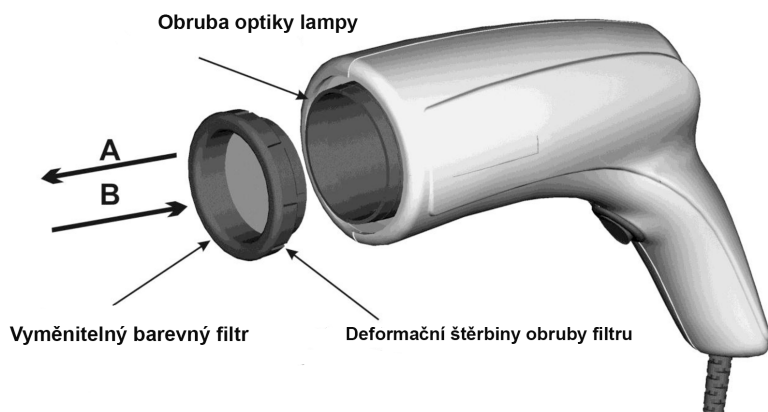

Nasazení filtru probíhá podobným způsobem jako jeho odstranění. Chyťte okraj obruby filtru tak, aby štěrby zůstaly volné a rozhodným pohybem ve směru šipky B zatlačte objímku filtru na obrubu biolampy. Tiché kliknutí signalizuje, že filtr bezpečně zapadl do objímky biolampy. Přesvědčte se, že filtr je správně nasazen na svém místě.

Čištění biolampy UNIZDRAV

Před každým čištěním se přesvědčte, že jste přístroj vypnuli vypínačem v rukojeti přístroje a že jste síťový adaptér vytáhli ze zásuvky! Přístroj utřete měkkým hadříkem napuštěným malým množstvím lihu a usušte jej! Je ZAKÁZÁNO používat k čištění rozpouštědla a drsné látky! Nikdy se nedotýkejte optických částí přístroje (např. polarizačního filtru) drsnějšími látkami, nebo takovým prostředkem, který by jej mohl poškodit nebo poškrábat! To může podstatně snížit účinnost přístroje.

Po každém použití je nutno zařízení očistit!

Zásady používání biolampy UNIZDRAV

Před začátkem terapie se pomocí níže uvedeného seznamu můžeme seznámit s různými možnostmi použití biolampy.

Průměrná teplota povrchu lidského těla je 33 °C. Polarizační světlo biolampy zahřeje, díky infračervené složce světla, během procedury povrch těla na 37 °C. Tato teplota by za normálních okolností neměla způsobovat problémy. Doporučená vzdálenost mezi pokožkou těla (ošetřovaným místem) a výstupným filtrem biolampy by měla být cca. 5 cm. V případě, že je teplo pro ošetřované místo nepříjemné (např. při ošetřování popálenin, omrzlin a bolestivě zanícených míst těla), zvětšete tuto vzdálenost na 10 cm nebo na vzdálenost, kdy již teplo nebudete vnímat nepříjemně. V těchto případech jsou ale účinky biolampy sníženy a musíte tak přiměřeně prodloužit dobu působení biolampy.

Pokud ošetřujete část těla s neporušenou zdravou pokožkou (např. při svalových problémech), můžete biolampu přiblížit k pokožce až na vzdálenost 2 cm, případně se může obruba filtru pokožky i dotýkat. Ošetřované místo musí být před použitím biolampy očištěno.

Zapněte přístroj a začněte s ozařováním ošetřovaného místa!

4 minuty působení je minimální doba pro vyvolání biologické reakce těla, resp. nastartování celého léčebného procesu. Pro úplné a účinné působení polarizovaného světla na ošetřované místo je zapotřebí min. 4 minuty, ale ze zkušeností se doporučuje doba působení světla 5-10 minut.

Nejúčinnější je kombinace terapie polarizovaným světlem (5-10 min) a následně barevná terapie (2 x 10 min s odstupem 20 minut mezi dvěma barevnými terapiemi). Doporučuje se používat tuto kombinaci terapie polarizovaným světlem s barevnou terapií 1-2x denně (nejlépe ráno a večer).

Používání biolampy pro léčbu polarizovaným světlem se doporučuje při hojení ran a obnově tkání, ve fyzioterapii a rehabilitaci, v revmatologii, sportovní medicíně, kosmetice a dermatologii.

Příklady použití léčby polarizovaným světlem:

Hojení ran a obnova tkání – pooperační hojení, jizvy, popáleniny, proleženiny, vředy bérce, pásový opar, křečové žíly.

Ve fyzioterapii a rehabilitaci - zmenšuje otoky, urychluje regenerační procesy, zmierňuje svalové napětí.

V revmatologii - zmierňuje bolesti, odstraňuje ztuhlost, bolesti a únavu nohou, zmierňuje revma.

V dermatologii - akné, ekzémy, hematomy, celulitida, vrásky, herpes.

V kosmetice - omlazuje a osvěžuje pleť, zlepšuje barvu, strukturu pleti a její pružnost, odstraňuje skvrny a pigmentové skvrnky.

Příklady použití léčby barevnou terapií:

MODRÁ barva - je barvou klidu a mieru. Snižuje puls, uklidňuje nervy, zvyšuje schopnost koncentrace, má dezinfekční a ochlazující účinek. Snižuje záněty, působí proti stresu a nespavosti. Modrá barva má stahující účinek, proto je vhodná bezprostředně po stomatologických zákrocích a poraněních. Je zvláště vhodná pro děti.

ČERVENÁ barva – dodává energii a sílu. Má největší biostimulační účinek. Je spojena s dolní částí těla, z dolního konce zad až po nárt. Zvyšuje aktivizaci fyzických sil, snižuje bolesti v kříži, podporuje krvní oběh. Červená barva vyvíjí stimulační účinek při nedostatku energie. Zrychluje oběh krve a ostatních telesných tekutin, doporučuje se ji aplikovat při problémech s krvním oběhem. Obsahuje tzv. „růstové vlny“ a proto se doporučuje používat ji při léčení ran. Pokud je rána zahnisaná, doporučuje se ji nejprve vydezinfikovat modrým světlem.

ZELENÁ barva – se považuje za neutrální barvu. Vyskytuje se v přírodě nejvíce. Energie zelené barvy vytváří rovnováhu a harmonii. Je důležitá pro nervovou soustavu a obecně dobrý zdravotní stav. Posiluje nervy a procesy podporující uvolnění a navozující vnitřní klid. Zelená barva je barvou srdce, plic, dětských žláz a imunitního systému. Podporuje léčivé účinky v případě dny, zánětu průdušek, černého kašle, vředů, cyst. Dobře působí na tvorbu kostí, posiluje pokožku, řeší problémy s očima. Odstraňuje nespavost.

ŽLUTÁ barva – je považována za teplou barvu, představuje sílu slunce. Žlutá barva nám dodává sílu a elán. Posiluje nervový systém a zažívací orgány, naplňuje nás optimismem. Působí příznivě na solar plexus, na ledviny, oběhový systém a trávení, čímž většinou vyřeší tzv. vegetativní poruchy. Zvýšíte-li ve svém okolí množství žlutého světla, snížíte tím duševní únavu, napomůžete trávení,

Biolampa UNIZDRAV + barevná terapie + stojan k biolampe (zvýhodněný set)

Návod na použití



uvolníte svaly a zmiřníte nervozitu. Žlutá barva posiluje žaludek, ale její nadměrné používání může vyvolat nevolnost a dokonce i zvracení. Účinkuje při zažívacích problémech, nadýmání, při pocitech na zvracení, kýle, zánětu sliznice žaludku, při vředech, cukrovce, klimakterii, při chronickém revma, zánětu kloubů, při nervových problémech (fobie), atp.

ORANŽOVÁ barva – je přechodovou barvou mezi žlutou a červenou barvou. Je to teplá povzbuzující barva, ne však tak agresivní jako červená. Je to barva úspěchu a dynamiky. Doplňuje fyzickou energii energií moudrosti a poznání. Pomáhá zvyšovat koncentraci, dobrou náladu a pomáhá proti neagresivním depresím. Odstraňuje nechuť k jídlu a chorobné chudnutí, ale odstraňuje i některé zažívací potíže. zácpu. Posiluje imunitní systém a samoléčebnou schopnost organismu. Je důležité ji aplikovat před a po operaci. Je to nejdůležitější barva v případě depresí, pesimismu a malátnosti.

FIALOVÁ barva - je barvou duchovního života, spiritualismu. Mystická fialová barva pomáhá lidem, kteří denně využívají svých intuitivních schopností. Je spojena s vrškem hlavy, s nejvyšší čakrou, dodává energii hypofýze, stimuluje vrchní část mozku a nervový systém. Fialová barva duchovně uklidňuje, má inspirativní účinky na meditaci a vizualizaci. Omezuje záněty, uvolňuje křeče, zmírňuje bolesti hlavy, astma, hnisavý zánět průdušek a může pomáhat i při roztroušené skleróze. Její fyzické účinky jsou hypnotické a uvolňující, proto pomáhá i při nervových problémech a epilepsii. Pomáhá léčit zapomnětlivost, ischias, schizofrenii a různé neurózy. Podobně jako oranžová barva povzbuzuje lymfatický systém. Vyhněte se fialové barvě při mentálních poruchách nebo problémech s alkoholem a drogami.

RŮŽOVÁ barva – je barvou bezpečnosti a něžnosti. Uvolňuje duševní napětí a výborně se dá použít i při vyčerpání. Kdo touží po něžnostech a ochraně, neví si užívat života, nebo trpí nedostatkem sebeúcty a sebelásky, nebo má přehnaný pocit zodpovědnosti, tomu může růžová barva pomoci. Růžová je rovněž barvou rozdávaní radosti a barvou lásky. Ozařování spodní části těla touto barvou zvyšuje pohlavní touhu a naplnění. Zároveň uvolňuje vnitřní napětí, brzdí agresivitu a povzbuzuje k něze.

K přesnému stanovení detailů léčby si vyžádejte názor odborného lékaře! Způsob kombinace léčby polarizovaným světlem a barevné terapie naleznete v odborné literatuře nebo požádejte o radu Vašeho odborného lékaře.

Kontraindikace

Je přísně ZAKÁZÁNO používat biolampu UNIZDRAV při onemocnění trombózou!!! Při ozařování v okolí oka mějte vždy během celé terapie zavřené oči, protože přímé osvětlení může být pro oko nepříjemné! Kontaktní čočky si před ošetřením biolampou UNIZDRAV vyjměte z očí.

Bezpečnostní opatření související s používáním biolampy UNIZDRAV

Použití biolampy UNIZDRAV bezpodmínečně konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, dermatologem nebo odborně vzdělanou kosmetičkou! Biolampu používejte jen a výhradně na radu odborníka!

Biolampu UNIZDRAV používejte výhradně se síťovým adaptérem 230/12V, 50Hz, 1700mA, typového označení AD-1201700AK výrobce MCE ELECTRONIC CO! Přesvědčte se o tom, že napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na síťovém adaptéru! V případě, že halogenová žárovka nebo ventilátor, popřípadě ani jeden z nich nefunguje, okamžitě vypněte přístroj, síťový zdroj vytáhněte ze síťové zásuvky 230V a obraťte se na servisní středisko uvedené na poslední straně návodu k použití! Nepokoušejte se o opravu přístroje, přístroj neotvírejte, ztrácíte tím nárok na záruku přístroje! Když objevíte při použití biolampy nějaké abnormality (žárovka bliká, vydává slabší světlo, chod ventilátoru je nepravidelný), obraťte se rovněž na servisní středisko uvedené na poslední straně návodu k použití!

Rozmontování síťového zdroje výrobce MCE ELECTRONIC CO. je přísně ZAKÁZÁNO! Zároveň by to rovněž znamenalo ztrátu záruky.

Ohebný kabel síťového zdroje je nutno chránit před poškozením. Je zakázáno přístroj uvádět do chodu, pokud je kabel nebo samotný přístroj poškozen! V případě jejich poškození je třeba se obrátit na servisní středisko. Přístroj chraňte před prachem, kapající vodou, resp. vlhkým prostředím! Přístroj používejte v rozmezí teplot 0 - 40 °C! Je ZAKÁZÁNO nořit přístroj do vody a používat jej ve vzdálenosti kratší než 2m od vany, sprchy a či jiného vlhkého prostředí! Pokud se do přístroje dostane voda nebo jakýkoli cudzí předmět, odpojte přístroj ze sítě a zašlete jej ke kontrole do servisního střediska! V případě poškození barevného filtru (zlomení, prasknutí) se rovněž obraťte na autorizované středisko se žádostí o jeho doplnění.

Kvůli intenzivnímu světlu je přísně ZAKÁZÁNO svítit biolampou do očí, nebo se přímo dívat do biolampou vyzařovaného světla!

Nenechávejte přístroj zapnutý delší dobu, aniž byste jej používali!

V zájmu správného fungování přístroje jej chraňte před silnými otřesy a údery. Zařízení nedržte za kabel, netahejte za něj a netočte

Biolampa UNIZDRAV + barevná terapie + stojan k biolampe (zvýhodněný set)

Návod na použití



s ním! Zástrčku síťového adaptéru po použití přístroje, před čištěním resp. poruchy vytáhněte ze zásuvky! Elektrické opravy přístroje může provádět výhradně školený odborník. V žádném případě nepříkrývejte a neucpávejte větrací otvory nacházející se v zadní části přístroje, protože jsou nezbytné pro správnou funkci přístroje – zabraňují totiž jeho přehřátí. Dbejte na to, aby se přes větrací otvory dovnitř přístroje nedostaly cudzí předměty!

V případě jakékoli poruchy biolampy UNIZDRAV se z ní nestane pro zdraví škodlivé zařízení. V případě, že biolampa začne jakkoli nestandardně fungovat, obraťte se s důverou na servisní středisko! Pokud budete biolampu řádně používat, nevyžaduje žádnou údržbu.

Po každém použití přístroje je nutno zařízení očistit!

Technická data biolampy UNIZDRAV

Napájení elektrickou energií: 230V/50Hz

Příkon přístroje: 22W

Síťový zdroj: 230/12V, 50Hz, 1700mA, výrobce MCE Electronic Co

Typ: AD-1201700AK s dvojitou izolací

Žárovka: 12V, 20W OSRAM 48860 SP halogenová lampsa se studeným zrkadlem

Třída izolace: II.

Ochrana proti vniknutí tuhých částic a kvapalin: IP 20

Ochrana proti zásahu elektrickým proudem: typ BF

Teplota barvy: 3100K

Měrný výkon:

ve vzdálenosti 2 cm od výstupního okna: 30 mW/cm² ve vzdálenosti 5 cm od výstupního okna: 9 mW/cm²

ve vzdálenosti 13.4 cm od výstupního okna: 5 mW/cm² Stupeň polarizace: více než 99% (480-750nm) Průměr polarizačního filtru: 40 mm

Celková hmotnost: 0.8 kg

Norma zohledněna při návrhu přístroje: MSZ EN 60601-1 1997

Záruka

Výrobce poskytuje na biolampu UNIZDRAV záruku 2 roky od koupě přístroje. Záruka se nevztahuje na následující případy:

- pokud byl přístroj nebo síťový adaptér během záruční doby otevřen neoprávněnou osobou.
- poškození zapříčiněné nesprávným používáním,

Kolorterapie - sada 6 kusů barevných filtrů

Pro zvýšení účinku léčebné terapie s biolampou UNIZDRAV výrobce doporučuje požití jednotlivých barevných filtrů na různé části těla.

Koloterapii si můžete objednat samostatně. Ne součástí balení biolampy UNIZDRAV.

Stojan k biolampě UNIZDRAV

Stojan FS-100B podstatně zvýší užitnou hodnotu biolampy. Nemusíte namáhavě držet lampu v ruce při ozařování. Pomocnou stojanu si můžete léčit části těla, které byste bez pomoci stojanu nezvládli.

Stojan dodáváme samostatně.