



(CZ) Napínací vyhřevná podložka **Návod k použití**

• Vysvětlivky značek na etiketě



Přečtěte si upozornění



Nepoužívejte přikrývku složenou
nebo shrnutou!



Nezapichujte do ní jehly!



Textilie použité pro tento výrobek
splňují vysoké zdravotně ekologické
nároky standardu Öko-Tex 100,
doloženo výzkumným ústavem Ho-
henstein.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

Rozsah dodávky: 1 vyhřevná podložka, 1 spínač, 1 návod k použití

1. Důležité bezpečnostní pokyny – čtete pozorně a uchovejte pro pozdější použití

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Používejte tuto termopodložku pouze k účelu popsanému v tomto návodu k použití.
- Tato termopodložka není určena k použití v nemocnicích.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Nesmí jej používat zejména nemohoucí, malé děti nebo osoby necitlivé vůči teplotním změnám (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Elektrická a magnetická pole vycházející z tohoto výrobku mohou za jistých podmínek poškodit funkci vašeho kardiostimulátoru. Nacházejí se však hluboko pod hraničními hodnotami: elektrická intenzita pole: max. 5000 V/m, magnetická intenzita pole: max. 80 A/m hustota magnetického toku: max. 0,1 mili Tesla. Před použitím tohoto výrobku se prosím poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda termopodložka leží na matraci dokonale rovně.
- Termopodložku
 - připojit pouze na napětí uvedené na přístroji;
 - nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu;
 - v posteli neohýbejte ani nezakládáte pod matraci;
 - neskřípnete (obzvláště u nastavitelných postelí nebo oddělených matic);
 - ostře nepřehýbejte;

- nepoužívejte na zvířatech;
- nepoužívejte ve vlhkém stavu.
- Když je termopodložka zapnutá, nesmí
 - na ní být položen žádný předmět (např. kufr nebo koš na prádlo);
 - na ní být položen žádný zdroj tepla jako ohřívací láhev, ohřívací poduška nebo něco podobného;
 - být vypínač přikryt dekou, polštářem nebo něčím podobným nebo na přístroji ležet.
- Netahejte, nekrutěte ani ostře neohýbejte vedení.
- Nezapichujte do termopodložky žádné jehly nebo ostré předměty.
- Tato ohřívací příkrývka smí být používána pouze s typem spínače uvedeným na přístroji (etiketě).
- Tuto termopodložku nesmějí používat děti, jedině pokud by byl vypínač nastaven jedním z rodičů nebo osobou, která na děti dohlíží, nebo pokud by bylo dítě dostatečně poučené o tom, jak vypínač bezpečně obsluhovat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Termopodložka by se měla často testovat, zda nevykazuje znaky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové znaky vyskytují nebo pokud byl přístroj nepřiměřeně používán, musí být před opětným použitím odnesen k výrobci nebo obchodníkovi.
- Opravy může provést pouze odborný personál nebo výrobcem autorizovaná opravna, protože jsou k opravě potřeba speciální nástroje. Nepřiměřenými opravami může vzniknout pro uživatele závažné nebezpečí.
- Pokud byste měli k používání našich přístrojů další dotazy, obraťte se prosím na náš zákaznický servis nebo se informujte na www.beurer.de.

2. Použití

Tato termopodložka je určena k vyhřívání postelí. Termopodložka se nejlépe ohřívá, je-li při zapnutí přikrytá peřinou. Je-li podložka zakrytá, trvá zahřátí cca 30 minut. Termopodložku můžete použít z obou stran.

3. Obsluha

3.1 Bezpečnost

Termopodložku vypíná BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM BEURER (BSB). V případě chyby zabraňuje tato elektronická senzorová technika díky automatickému vypnutí přehřátí přístroje po celé jeho ploše. Následuje-li na základě chyby automatické vypnutí termopodložky díky bezpečnostnímu systému Beurer (BSB), nesvítí už kontrolka ani v zapnutém stavu přístroje. Prosím dbejte na to, že termopodložka nesmí být z důvodu bezpečnosti po případě chyby dále používána a musí být odeslána na příslušnou servisní adresu.


3.2 Uvedení do provozu

Výhřevnou podložku rozprostřete rovně na matraci tak, aby se výstup přívodního kabelu nacházel přibližně ve výšce ramen (viz obrázek). Horní část není vyhřívána. Následně přetáhněte boční část jako napínací prostěradlo přes boky matrace. Výhřevná podložka je koncipována pro matrace velikosti 90x200cm i 100x200cm. Nakonec upevněte své napínací prostěradlo tak, aby se výhřevná podložka nacházela mezi matrací a napínacím prostěradlem.

Dbejte na to, aby výhřevná podložka byla vždy rovně rozprostřená a aby se při použití neshrnula nebo netvořila přehyby. Při stlání zkontrolujte její polohu – výhřevná podložka smí být uvedena do provozu pouze rovně rozprostřená.


Podložka je se spínačem spojena zástrčkovou spojkou.

Pro spojení zasuňte oba konce zástrčkové spojky kompletně do sebe, tak aby zaskočily aretační háčky.

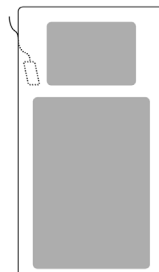

Pro odpojení spínače od podložky stiskněte současně aretační háčky a rozpojte oba díly zástrčkové spojky tažením od sebe (viz obrázek). Doporučujeme zapnout výhřevnou podložku cca 30 minut před tím, než si půjdete lehnout, a přikrýt ji přikrývkou, aby neunikalo teplo.

Pozor: Elektronické části ve vypínači ho během použití termopodložky lehce zahřívají. Vypínač proto nikdy nesmí na podložce ležet nebo být zakrytý dekou, polštářem nebo něčím podobným.

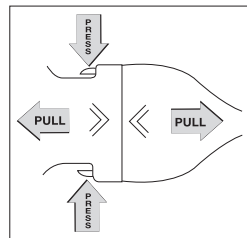

3.3 Volba teploty

Pro uvedení přístroje do provozu nejprve připojte spínač k topnému tělesu spojením zástrčkové spojky. Poté zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.

Nejrychlejšího zahřátí podložky dosáhnete tím, že nastavíte nejdříve nejvyšší stupeň teploty. Doporučujeme při používání po dobu několika hodin nastavit nejnižší stupeň teploty.

3.4 Teplotní stupeň

0 = vypnuto

1 = minimální teplota

2 = střední teplota

3 = maximální teplota

3.5 Vypínací automatika

Ú této výhřevné podložky dojde k automatickému vypnutí po cca 3 hodinách.

Při ohřívání výhřevné podložky svítí červená kontrolka na spínači. Po dosažení vypínacího limitu již výhřevná podložka není déle ohřívána a červená kontrolka začne blikat. Pro opětovné zahřívání výhřevné podložky nastavte spínač nejprve na cca 5 vteřin do pozice „0“ (vypnuto), a pak zvolte požadovaný teplotní stupeň. Nebude-li již výhřevná podložka po časovaném vypnutí používána, měla by být vypnuta (stupeň „0“), anebo její zástrčka vytažena ze zásuvky.

4. Čištění a péče

Před čištěním podložky vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Menší fleky můžete odstranit hadříkem nebo navlhčenou houbičkou a eventuálně trochou jemného tekutého čisticího prostředku. Dbejte na to, že podložku nesmíte chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat nebo žehlit. V žádném případě podložku nezapínejte, aby se usušila. Neupevňujte podložku k sušení količky ani ničím podobným.

4.1 Čištění a péče termopodložky se snímatelným vypínačem

Před praním nejdříve odpojte od přikrývky zásuvkový spoj a tím i spínač (viz obrázek 3.2).

Nastavte pračku na šetrný prací program na 40 °C. Použijte jemný tekutý prostředek a dávkujte dle pokynů výrobce. . Prosím vezměte v úvahu, že podložka je příliš častým praním namáhána. Podložka by proto měla být během celé životnosti prána v pračce max. 5 krát.

Vypínač nejdříve opět spojte s podložkou, pokud jsou zásuvkový spoj a podložka dokonale suché.

5. Uschování

Pokud podložku delší čas nepoužíváte, doporučujeme vám uschovávat ji v originálním balení v suchém prostředí a bez zátěže.

Nechte vyhřívanou podložku nejprve vychladnout.

6. Likvidace

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud máte dotazy, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



